

TUOTEKUVASTO 2026



Sisällysluettelo

Yksitehot	1
Monitehot.....	3
Syväterävät ja toimistomonitehot	9
Kaksitehot	11
Suojalasit	12
Värit	13

Yksitehot

Yksiteholinssit on suunniteltu korjaamaan näköä yhdelle tietyllä etäisyydelle, kuten kauas, lähelle tai päätetyöskentelyyn. Valikoimastamme löytyy optimaalinen vaihtoehto jokaiseen tarpeeseen, huomioiden sekä näön laatu että linssien esteettisyys.

Mitä suurempi voimakkuus on, sitä enemmän linssin reuna (miinuslinssi) tai keskiosa (pluslinssi) paksunee. Valitsemalla korkeamman taitekertoimen saadaan linseistä ohuempat, kevyemmät ja esteettisemmät.

- ✓ Single 5 (1.5): Sopii pienille voimakkuuksille, noin -2.00 dpt / +1.50 dpt asti. Edullinen peruslinssi, joka toimii parhaiten täyskehyksissä.
- ✓ Single 6 (1.6): Optimaalinen valinta noin -4.00 dpt / +3.00 dpt asti. Linssi on materiaaliltaan sitkeää, joten se on paras valinta hengettömiin ja siimatehyksiin.
- ✓ Single 67 (1.67): Suositellaan voimakkuuksille -3.50...-6.00 dpt / +2.50...+5.00 dpt. Linssi on merkittävästi ohuempi ja kevyempi kuin peruslinssi.
- ✓ Single 7 (1.74): Korkeimmille voimakkuuksille, kun tarve on yli -6.00 dpt tai +5.00 dpt. Markkinoiden ohuin linssivaihtoehto, joka tekee vahvoistakin linseistä siron näköiset. Ei sovellu hengettömiin tai siimatehyksiin.

Kaikkiin yksiteholinsseihimme on saatavilla korkealaatuisia pinnoitteita. Heijastamaton pinta parantaa näkemisen kontrastia ja poistaa häiritseviä heijastuksia esimerkiksi autolla ajaessa tai näyttöpäätetyössä. Kova pinta taas suojaa linssiä arjen käytössä tulevilta naarmuilta. Huipputason Prima-pinnoite hylkii lisäksi likaa, vettä ja pölyä, mikä tekee linseistä helpommat puhdistaa.

Taulukko 1. Valmistusraajat (Yksitehot)

Linssi	Single 5		Single 6		Single 67		Single 7	
Taitekerroin	1.5		1.6		1.67		1.74	
Halkaisija (mm)	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl
55	-12.00 / +8.00	6.00	-15.00 / +10.00	6.00	-	-	-	-
60	-10.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00	-15.00 / +10.00	6.00	-	-
65	-8.00 / +6.00	4.00	-12.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00	-18.00 / +12.00	6.00
70	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-12.00 / +8.00	6.00	-16.00 / +10.00	6.00
75	-7.00 / +4.00	2.00	-8.00 / +4.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-16.00 / +10.00	4.00
80	-7.00 / +4.00	2.00	-6.00 / +2.00	4.00	-	-	-	-
Max Prisma	8.00		6.00		6.00		4.00	

Taulukko 2. Lisäominaisuudet ja rajoitukset

Ominaisuus	Single 5	Single 6	Single 67	Single 7
Vakio-ominaisuus	Valittavissa (Basic/Hard/Plus/Prima)	Prima	Prima	Prima
Sinivalosuoja (BlueCut)	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Väri	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Tummuvuus	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Polarisoiva	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Ei saatavilla


Monitehot

Moniteholinssit ovat täydellinen ratkaisu ikänäön korjaamiseen. Niissä voimakkuus muuttuu saumattomasti linssin yläosan kaukoalueesta alaosan lähialueeseen. Tämä mahdollistaa selkeän näkemisen kaikille etäisyyksille ilman tarvetta vaihtaa silmälaseja.

Miksi valita korkeampi tuotetaso?

Moniteholinssin hionta määrittää sen, kuinka laajat ja luonnolliset näkemisen alueet ovat.

- ✓ Basic ja Plus: Hyviä perusratkaisuja, joissa painotus on kauas näkemisessä. Lähialueet ovat kapeammat, mikä vaatii enemmän pään liikettä sivusuunnassa.
- ✓ Comfort ja Pro: Digitaalisesti optimoidut linssit. Näköalueet ovat laajemmat ja vääristymät reuna-alueilla huomattavasti pienemmät. Sopivat hyvin aktiiviseen elämään ja isomman lähilisän kanssa.
- ✓ Ultra: Yksilöllisin ja kehittynein linssimme. Näköalueet ovat maksimoitu ja linssiin tottuminen on nopeampaa kuin millään muulla linssillä. Tarjoaa luonnollisimman katselukokemuksen.

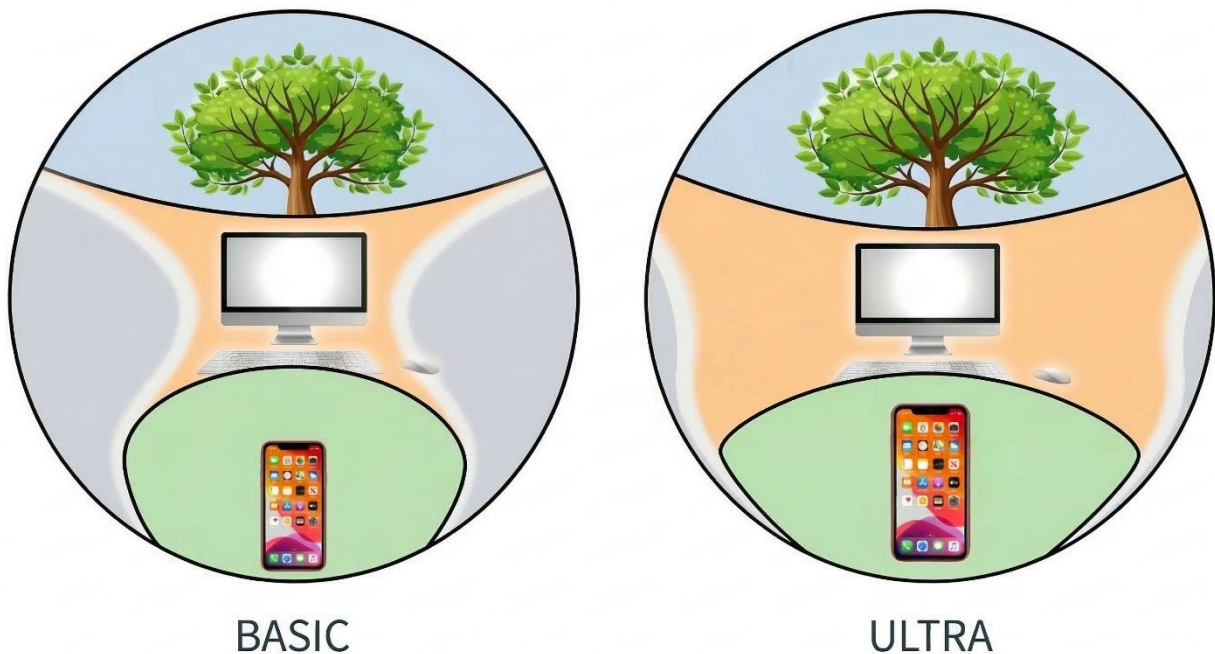

Kuva 1. Luotu Nano Banana 2 -tekoälyllä

Multi Basic

Tämä on monitehovalikoimamme edullisin vaihtoehto. Se on suunniteltu erityisesti kaukokatseluun ja lähialue optimoitu arkisista askareista selviytymiseen, kuten kaupassa käymiseksi.

Taulukko 3. Multi Basic -valmistusrajat

Taitekerroin	1.5		1.6	
Halkaisija (mm)	Sf	Cyl	Sf	Cyl
55	-	-	-15.00 / +10.00	6.00
60	-10.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00
65	-8.00 / +6.00	4.00	-12.00 / +8.00	6.00
70	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00
75	-7.00 / +4.00	2.00	-8.00 / +4.00	4.00
80	-7.00 / +4.00	2.00	-6.00 / +2.00	4.00
Max Prisma	4.00		4.00	
Min Add	+0.75		+0.75	
Max Add	+3.00		+3.00	

Taulukko 4. Multi Basic lisäominaisuudet ja rajoitukset

Ominaisuus	Multi Basic 1.5	Multi Basic 1.6
Vakio-ominaisuus	Valittavissa (Basic/Hard/Plus/Prima)	Prima
Sinivalosuoja (BlueCut)	Ei saatavilla	Ei saatavilla
Väri	Saatavilla	Saatavilla
Tummuuus	Saatavilla (Prima)	Saatavilla
Polarisoiva	Saatavilla (Prima)	Saatavilla
Minimi asennuskorkeus	14mm	14mm

Multi Plus

Multi Plus on tasapainoinen moniteholinssi, joka sopii hyvin aktiiviseen arkeen. Se tarjoaa selkeän näköalueen kaukaisille kohteille ja on optimoitu siten, että siirtymä kaukoalueelta lähialueelle on pehmeämpi kuin Basic-tasolla.

Taulukko 5. Multi Plus -valmistusrajat

Taitekerroin		1.5		1.6	
Halkaisija (mm)	Sf	Cyl	Sf	Cyl	
55	-12.00 / +10.00	6.00	-15.00 / +10.00	6.00	
60	-10.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00	
65	-8.00 / +6.00	4.00	-12.00 / +8.00	6.00	
70	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	
75	-7.00 / +4.00	2.00	-8.00 / +4.00	4.00	
80	-7.00 / +4.00	2.00	-6.00 / +2.00	4.00	
Max Prisma	4.00		4.00		
Min Add	+0.75		+0.75		
Max Add	+3.00		+3.00		

Taulukko 6. Multi Plus lisäominaisuudet ja rajoitukset

Ominaisuus	Multi Plus 1.5	Multi Plus 1.6
Vakio-ominaisuus	Valittavissa (Basic/Hard/Plus/Prima)	Prima
Sinivalosuoja (BlueCut)	Ei saatavilla	Ei saatavilla
Väri	Saatavilla	Saatavilla
Tummuvuus	Saatavilla (Prima)	Saatavilla
Polarisoiva	Saatavilla (Prima)	Saatavilla
Minimi asennuskorkeus	14mm	14mm

Multi Comfort

Multi Comfort on digitaalisesti optimoitu moniteholinssi, joka on suunniteltu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Se tarjoaa selkeästi laajemmat näkökentät kuin Basic- ja Plus-tasot. Tämä linssi on erinomainen valinta niille, jotka käyttävät paljon digitaalisia laitteita, kuten älypuhelimia ja tabletteja.

Taulukko 7. Multi Comfort -valmistusrajat

Taitekerroin	1.5		1.6		1.67		1.74	
Halkaisija (mm)	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl
55	-	-	-15.00 / +10.00	6.00	-	-	-	-
60	-10.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00	-15.00 / +10.00	6.00	-	-
65	-8.00 / +6.00	4.00	-12.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00	-18.00 / +12.00	6.00
70	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-12.00 / +8.00	6.00	-16.00 / +10.00	6.00
75	-7.00 / +4.00	2.00	-8.00 / +4.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-16.00 / +10.00	4.00
80	-7.00 / +4.00	2.00	-6.00 / +2.00	4.00	-	-	-	-
Max Prisma	6.00		6.00		6.00		6.00	
Min Add	+0.75		+0.75		+0.75		+0.75	
Max Add	+3.00		+3.00		+3.00		+3.00	

Taulukko 8. Multi Comfort lisäominaisuudet ja rajoitukset

Ominaisuus	Multi Comfort 1.5	Multi Comfort 1.6	Multi Comfort 1.67	Multi Comfort 1.74
Vakio-ominaisuus	Valittavissa (Basic/Hard/Plus/Prima)	Prima	Prima	Prima
Sinivalosuoja (BlueCut)	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Väri	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Tummuuus	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Polarisoiva	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Ei saatavilla
Minimi asennuskorkeus	12mm	12mm	12mm	12mm

Multi Pro

Multi Pro on huipputason moniteholinssi, joka on räätälöity vaativalle käyttäjälle. Sen edistynyt hiontateknologia mahdollistaa erittäin laajat näköalueet ja minimoi reuna-alueiden vääristymät. Linssi sopii täydellisesti henkilöille, jotka vaihtavat katsettaan tiheästi kaukaa lähelle ja tarvitsevat vääristymätöntä näköä kaikissa tilanteissa.

Taulukko 9. Multi Pro -valmistusrajat

Taitekerroin	1.5		1.6		1.67		1.74	
Halkaisija (mm)	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl
55	-12.00 / +10.00	6.00	-15.00 / +10.00	6.00	-15.00 / +12.00	6.00	-	-
60	-10.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00	-15.00 / +10.00	6.00	-18.00 / +13.00	6.00
65	-8.00 / +6.00	4.00	-12.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00	-18.00 / +12.00	6.00
70	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-12.00 / +8.00	6.00	-16.00 / +10.00	6.00
75	-7.00 / +4.00	2.00	-8.00 / +4.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-16.00 / +10.00	4.00
80	-7.00 / +4.00	2.00	-6.00 / +2.00	4.00	-	-	-	-
Max Prisma	6.00		6.00		6.00		6.00	
Min Add	+0.75		+0.75		+0.75		+0.75	
Max Add	+3.00		+3.00		+3.00		+3.00	

Taulukko 10. Multi Pro lisäominaisuudet ja rajoitukset

Ominaisuus	Multi Pro 1.5	Multi Pro 1.6	Multi Pro 1.67	Multi Pro 1.74
Vakio-ominaisuus	Valittavissa (Basic/Hard/Plus/Prima)	Prima	Prima	Prima
Sinivalosuoja (BlueCut)	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Väri	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Tummuuus	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Polarisoiva	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Ei saatavilla
Minimi asennuskorkeus	12mm	12mm	12mm	12mm

Multi Ultra

Multi Ultra on täysin yksilöllisesti räätälöity moniteholinssi. Se on suunniteltu tarjoamaan luonnollisin mahdollinen katselukokemus, jossa linssin tuomat rajoitukset on häivytetty minimiin. Tämä linssi on valinta käyttäjälle, joka haluaa vain parasta, olipa kyseessä optinen laatu, mukavuus tai keveys.

Taulukko 11. Multi Ultra -valmistusrajat

Taitekerroin	1.5		1.6		1.67		1.74	
Halkaisija (mm)	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl
55	-12.00 / +10.00	6.00	-15.00 / +10.00	6.00	-16.00 / +12.00	6.00	-20.00 / +15.00	6.00
60	-10.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00	-15.00 / +10.00	6.00	-18.00 / +13.00	6.00
65	-8.00 / +6.00	4.00	-12.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00	-18.00 / +12.00	6.00
70	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-12.00 / +8.00	6.00	-16.00 / +10.00	6.00
75	-7.00 / +4.00	2.00	-8.00 / +4.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-16.00 / +10.00	4.00
80	-7.00 / +4.00	2.00	-6.00 / +2.00	4.00	-	-	-	-
Max Prisma	6.50		6.50		6.50		6.50	
Min Add	+0.75		+0.75		+0.75		+0.75	
Max Add	+3.00		+3.00		+3.00		+3.00	

Taulukko 12. Multi Ultra lisäominaisuudet ja rajoitukset

Ominaisuus	Multi Ultra 1.5	Multi Ultra 1.6	Multi Ultra 1.67	Multi Ultra 1.74
Vakio-ominaisuus	Valittavissa (Basic/Hard/Plus/Prima)	Prima	Prima	Prima
Sinivalosuoja (BlueCut)	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Väri	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Tummuuus	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Polarisoiva	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Ei saatavilla
Minimi asennuskorkeus	11mm	11mm	11mm	11mm
Tarvittavat yksilölliset mitat	Kallistuskulma, kaarevuus	Kallistuskulma, kaarevuus	Kallistuskulma, kaarevuus	Kallistuskulma, kaarevuus

Syväterävät ja toimistomonitehot

Nämä linssit on suunniteltu erityisesti päätetyöskentelyyn, sillä niissä on erittäin leveä näköalue lähelle ja väljetäisyydelle. Ne mahdollistavat luonnollisen asennon näyttöpäätteen äärellä ja poistavat tarpeen päästä jatkuvalla liikuttamisella sivusuunnassa.

Vaikka linssit ovat optimaaliset toimistoympäristöön, ne soveltuvat erinomaisesti myös arkikäyttöön kodin sisätiloissa. Ne ovat loistavat lähilaset esimerkiksi lukemiseen, käsitöihin tai ruoanlaittoon.

Workspace

Workspace on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta sisätiloissa. Se on saatavilla kahdella eri degressiolla, jotta linssin syvyysterävyys voidaan valita käyttäjän tarpeen mukaan. Linssit tilataan lähivoimakkuudella. Lisäksi valitaan haluttu degressio (0.8 tai 1.4) sen mukaan, kuinka kauas linssillä halutaan nähdä.

- ✓ Degressio 0.8: Tarjoaa laajan näkökentän ja pehmeän siirtymän. Sopii erinomaisesti, kun tarve on painottunut lähityöhön ja hieman sen yli.
- ✓ Degressio 1.4: Mahdollistaa laajemman syvyysalueen huoneessa, jolloin näköalue ulottuu pidemmälle välialueelle.

Taulukko 13. Workspace-valmistusrajat

Taitekerroin	1.5		1.6		1.67		1.74	
Halkaisija (mm)	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl
65	-8.00 / +6.00	4.00	-12.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00	-18.00 / +12.00	6.00
70	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-12.00 / +8.00	6.00	-16.00 / +10.00	6.00
75	-7.00 / +4.00	2.00	-8.00 / +4.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-16.00 / +10.00	4.00
Max Prisma	4.00		4.00		4.00		4.00	

Taulukko 14. Workspace ominaisuudet ja rajoitukset

Ominaisuus	Workspace 1.5	Workspace 1.6	Workspace 1.67	Workspace 1.74
Vakio-ominaisuus	Valittavissa (Basic/Hard/Plus/Prima)	Prima	Prima	Prima
Sinivalosuoja (BlueCut)	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Minimi asennuskorkeus	10mm	10mm	10mm	10mm

Office

Office on optimaalinen valinta, jos työssä tarvitsee nähdä näytön ja näppäimistön lisäksi myös kauemmas, kuten kokouksissa tai neuvottelutiloissa. Se mahdollistaa vaivattoman näkemisen koko huoneen sisällä. On kuitenkin hyvä huomioida, että laajemman syvyysterävyuden vuoksi näköalueet ovat kapeammat kuin Workspace-linssissä.

- ✓ Tilaustapa: Linssit tilataan kuten monitehot (kaukovoimakkuus ja lähilisä).
- ✓ Räättälöinti: Voimakkuuksia voidaan muokata yksilöllisesti sen mukaan, kuinka pitkälle välialueen halutaan ulottuvan. Tämä mahdollistaa näköalueen painottamisen juuri niille etäisyyksille, joita asiakas omassa työssään eniten käyttää.

Taulukko 15. Office-valmistusrajat

Taitekerroin		1.5	1.6	
Halkaisija (mm)	Sf	Cyl	Sf	Cyl
65	-8.00 / +6.00	4.00	-12.00 / +8.00	6.00
70	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00
75	-7.00 / +4.00	2.00	-8.00 / +4.00	4.00
Max Prisma	4.00		4.00	
Min Add	+0.75		+0.75	
Max Add	+3.00		+3.00	

Taulukko 16. Office ominaisuudet ja rajoitukset

Ominaisuus	Office 1.5	Office 1.6
Vakio-ominaisuus	Valittavissa (Basic/Hard/Plus/Prima)	Prima
Sinivalosuoja (BlueCut)	Saatavilla (Prima)	Saatavilla
Minimi asennuskorkeus	12mm	12mm

Kaksitehot

Kaksiteholinssit ovat perinteinen valinta, jossa kaksi eri voimakkuutta on yhdistetty samaan linssiin. Linssin yläosalla nähdään kauas ja alaosan selkeärajaisella "luukulla" nähdään lähelle. Koska linssissä ei ole välialuetta, se tarjoaa erittäin vakaan ja vääristymättömän näkökentän molemmille etäisyyksille.

- ✓ Rakenne: Lukualue on muodoltaan 28 mm leveä "D-segmentti".
- ✓ Käyttö: Erinomainen valinta henkilöille, jotka eivät totu monitehojen keinuntaan tai tarvitsevat mahdollisimman leveän ja tasaisen lukualueen.

Taulukko 17. Bifo-valmistusrajat

Linssi	Bifo 5		Bifo 6		Bifo 67	
Taitekerroin	1.5		1.6		1.67	
Halkaisija (mm)	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl
65	-8.00 / +6.00	4.00	-12.00 / +8.00	6.00	-14.00 / +9.00	6.00
70	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-12.00 / +8.00	6.00
75	-7.00 / +4.00	2.00	-8.00 / +4.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00
Max Prisma	4.00		4.00		4.00	
Min Add	+0.75		+0.75		+0.75	
Max Add	+4.00		+4.00		+4.00	

Taulukko 18. Bifo ominaisuudet ja rajoitukset

Ominaisuus	Bifo 5	Bifo 6	Bifo 67
Vakio-ominaisuus	Valittavissa (Basic/Hard/Plus/Prima)	Prima	Prima
Sinivalosuoja (BlueCut)	Ei saatavilla	Ei saatavilla	Ei saatavilla
Väri	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Tummuuus	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla
Polarisoiva	Saatavilla (Prima)	Saatavilla	Saatavilla

Suojalasit

Suojalasilinssit on testattu ja sertifioitu EU:n standardien mukaisesti. Valikoima jakautuu kahteen eri suojausluokkaan (S ja F) sekä optiseen rakenteeseen (Single ja Multi).

- ✓ Safety S: Standardin mukainen perussuoja mekaanisia iskuja vastaan.
- ✓ Safety F: Korkeampi suojausluokka, joka on tarkoitettu vaativampiin olosuhteisiin.
- ✓ Optiikka: Single-mallit ovat perinteisiä yksitehoja. Multi-mallit on toteutettu Multi Basic -hionnalla, joka tarjoaa hyvän kaukonäön ja riittävän lukualueen työkäyttöön.

Taulukko 19. Safety-valmistusrajat

Linssi	Safety S Single		Safety F Single		Safety S Multi		Safety F Multi	
Taitekerroin	1.5		1.59		1.5		1.59	
Suojausluokka	S		F		S		F	
Halkaisija (mm)	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl	Sf	Cyl
65	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00	-8.00 / +6.00	4.00	-10.00 / +6.00	6.00
70	-8.00 / +6.00	4.00	-8.00 / +4.00	6.00	-8.00 / +6.00	4.00	-8.00 / +4.00	6.00
75	-7.00 / +4.00	2.00	-6.00 / +4.00	4.00	-7.00 / +4.00	2.00	-6.00 / +4.00	4.00
Max Prisma	4.00		4.00		4.00		4.00	
Min Add	-		-		+0.75		+0.75	
Max Add	-		-		+3.00		+3.00	

Taulukko 20. Safety ominaisuudet ja rajoitukset

Ominaisuus	Safety S & F (Single & Multi)
Vakio-ominaisuus	Hard
Muut vakiopinnoitteet	Ei saatavilla
Sinivalosuoja (BlueCut)	Ei saatavilla
Väri	Ei saatavilla
Tummuuus	Ei saatavilla
Polarisoiva	Ei saatavilla
Minimi asennuskorkeus	Safety S & F Multi -linssissä 14mm

Värit

Värillisillä linseillä voidaan parantaa asiakkaan näkömukavuutta. Kaikki värit sisältävät automaattisesti täyden UV-suojan. Muista aina varmistaa linssityypin ja ohennuksen yhteensopivuus ennen värin valintaa.

Taulukko 21. Saatavilla olevat värit

Väri	Tummuusaste	Käyttötarkoitus
Light	25 %	Kosmeettinen tyylisävy tai mukavuusväri jatkuvaan sisäkäyttöön.
Medium	65 %	Hyvä yleisväri kaupunkikäyttöön ja vaihtelevaan pilvipoutaan.
Dark	85 %	Perinteinen aurinkolasi voimakkaaseen häikäisyyn ja kirkkaaseen keliin.
Gradient	85 % - 50 %	Liukuväri, joka on tummimmillaan ylhäällä. Erinomainen esimerkiksi autolla ajoon, jolloin kojelauta näkyy vaaleamman osan läpi.
Polar	85 %	Polarisoiva linssi, joka poistaa vaakasuuntaiset heijastukset. Suosittele aina autoiluun ja vesille.
Transitions	Muuttuva, max 85 %	Tummuva linssi, joka reagoi UV-säteilyyn. Kirkas sisällä, tumma ulkona.

Värivalikoima ja rajoitukset

Eri ominaisuuksilla on rajoitettu värivalikoima:

- ✓ Tavalliset värit (Light, Medium, Dark, Gradient): Saatavilla väreissä ruskea, harmaa ja vihreä.
- ✓ Polarisoiva (Polar): Saatavilla ainoastaan väreissä ruskea ja harmaa.
- ✓ Tummuuus (Transitions): Saatavilla ainoastaan väreissä ruskea ja harmaa.

Tekniset rajoitukset ja saatavuus

- ✓ Yksitehot ja monitehot: Tavalliset värit ovat saatavilla kaikkiin tasoihin ja kaikkiin taitekertoimiin.
- ✓ Erikoislinssit: Värit, tummuuus ja polarisointi ovat saatavilla ainoastaan Bifo-linsseihin.
- ✓ Workspace, Office ja Safety: Näihin tuotteisiin ei saatavilla väriä, tummuvuutta tai polarisointia.
- ✓ Polarisoiva (Polar): Ei ole saatavilla ohennukseen 1.74.
- ✓ Tummuuus (Transitions) ja polarisoiva (Polar): Saatavilla vain, jos linssiin on valittu Prima-pinnoite.